


INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA PILOTA


Podczas pierwszego uruchomienia pilota musimy utworzyć nowego użytkownika, czyli należy przypisać swój numer pompy oraz podać imię i nazwisko użytkownika, które będzie wyświetlane na ekranie powitalnym po każdym uruchomieniu pilota. W pierwszej chwili po zaprogramowaniu Med-Linka zgłosi on poniższy komunikat:




W tym momencie pilot wymaga już połączenia przez Bluetooth z telefonem, a w tym celu potrzebny jest terminal Bluetooth, poniżej screen ze sklepu Play do terminala, z którego akurat korzystałem:

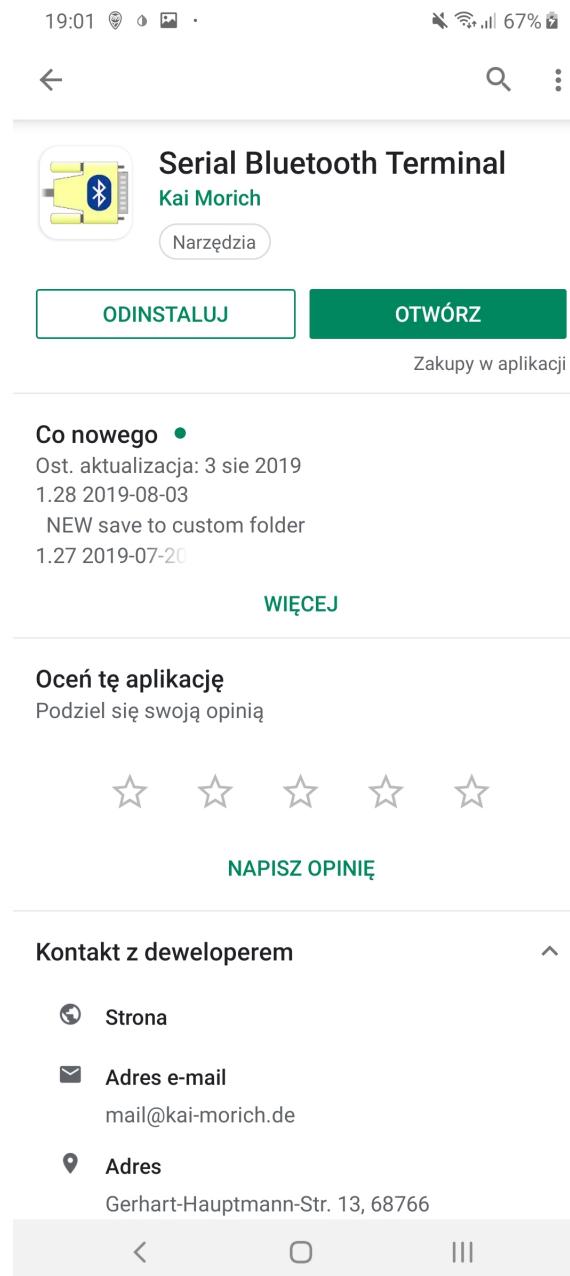

Po zainstalowaniu terminala robimy z jego menu scan dostępnych urządzeń bluetooth, nasz pilot rozgłasza się pod nazwą MED-LINK, wybieramy go z listy urządzeń. Po kliknięciu na nazwę MED-LINK następuje nawiązanie połączenia. W czasie, gdy na pilocie mamy aktywny ekran braku użytkownika i dojdzie do nawiązania połączenia Bluetooth to od razu pojawi się w terminalu informacja od pilota, żeby wprowadzić numer ID pompy, czyli 6 cyfr numeru seryjnego z naklejki pompy:

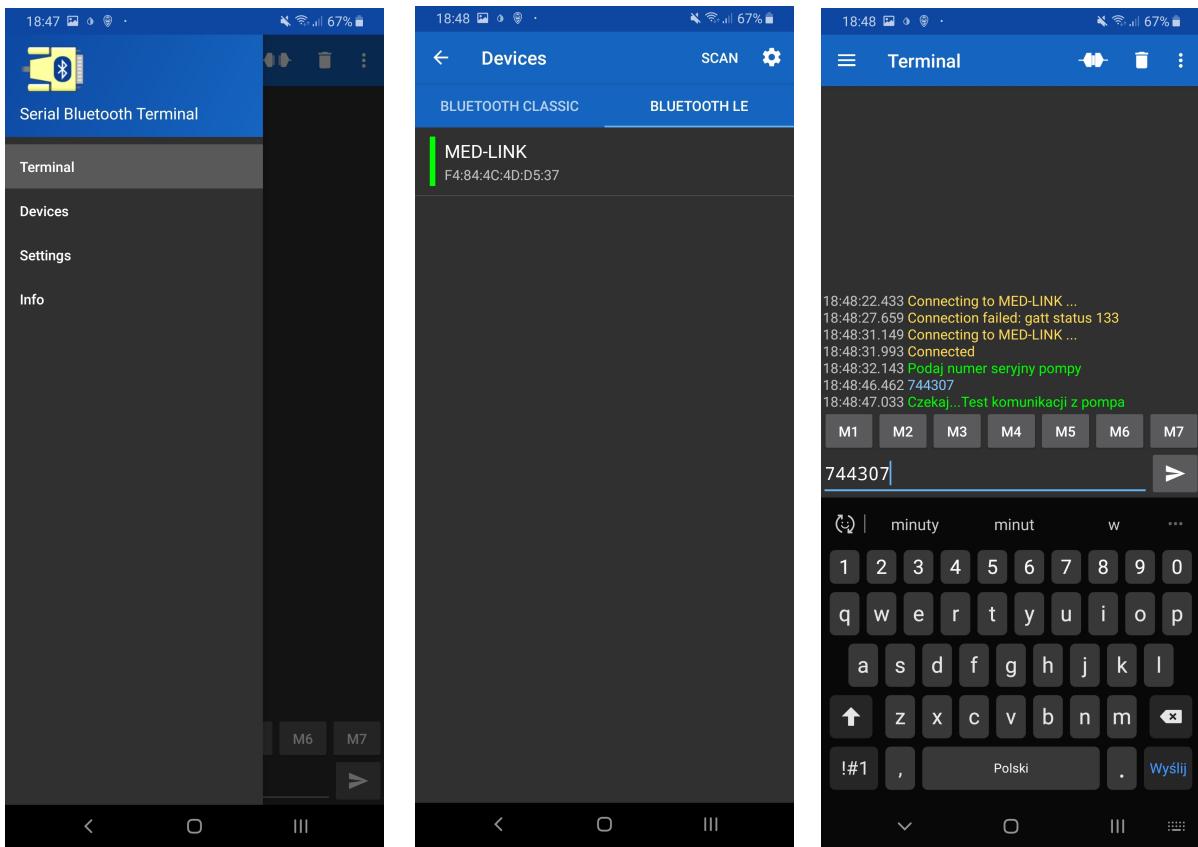





Po wpisaniu 6 cyfr pompy następuje próbne nawiązanie połączenia z pompą poprzez wielokrotne wysłanie komendy jej wybudzenia, gdy pompa odpowie na tą komendę, to w terminalu pojawi się Test OK. Następnie należy wprowadzić imię i nazwisko użytkownika. Terminal Bluetooth nie obsługuje polskich znaków. Dane z numerem pompy i nazwą użytkownika zostaną zapisane w pamięci pilota po czym nastąpi restart pilota. Po restarcie zostanie przeprowadzone budzenie pompy, pobranie z niej daty i godziny oraz pobranie modelu pompy. Program pilota współpracuje z dwoma pompami Medtronic VEO oraz Medtronic 722:

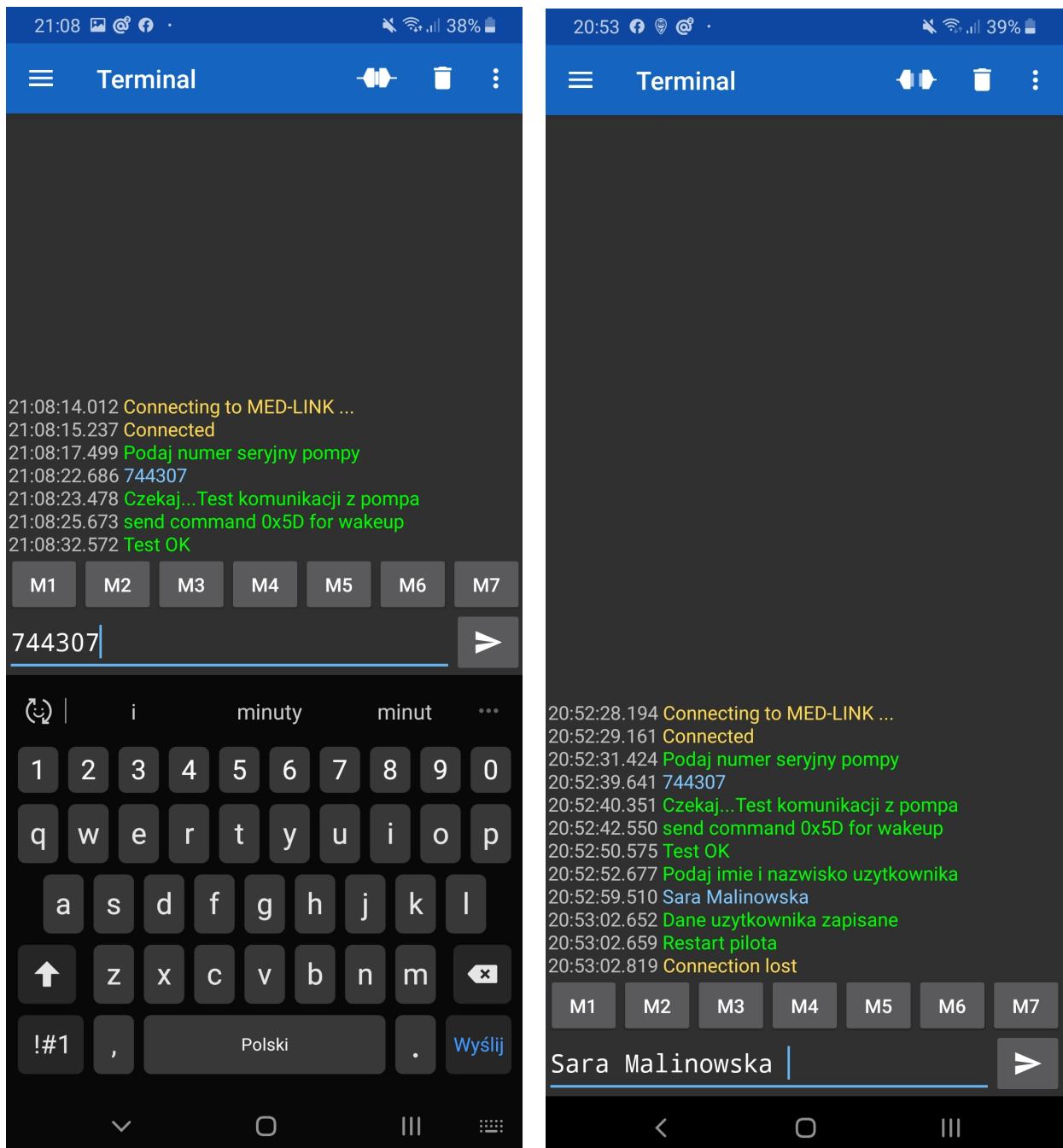


Po restarcie i przy każdorazowym włączeniu pilota będą się wyświetlać po kolejno poniższe ekranы, pierwszy informuje o konfiguracji modułu Bluetooth w pilocie, następnie przeprowadzana jest procedura wybudzenia pompy i pobranie potrzebnych danych na ekran powitalny użytkownika. Po pewnym czasie bezczynności pilota, czyli niekorzystania z jego przycisków nastąpi samoczynne wyłączenie pilota, czyli przejście w stan niskiego poboru prądu. Włączenie pilota z przycisków menu jest możliwe przez jednoczesne wcisnięcie i przytrzymanie przez około 2 sekundy przycisków góra i dół. Podczas czuwania pilot może być też włączony poprzez nawiązanie połączenia Bluetooth z terminaliem i odesłania w ciągu 10 sekund z terminala polecenia OK+CONN. Poniżej kolejne ekranu podczas włączania pilota z przycisków:



Skasowanie użytkownika jest wymagane, aby powiązać pilota Med-Link z inną pompą lub gdy chcemy wprowadzić inną nazwę użytkownika. Wykonanie tego jest możliwe po wejściu z menu do punktu "6. Ustawienia" a następnie do punktu "6.3 Usuń użytkownika". Gdy potwierdzimy to klikając ENTER na pilocie wtedy wyświetli się kolejna informacja, aby nawiązać połączenie z telefonem i tam wykonać dalszą procedurę kasowania użytkownika:

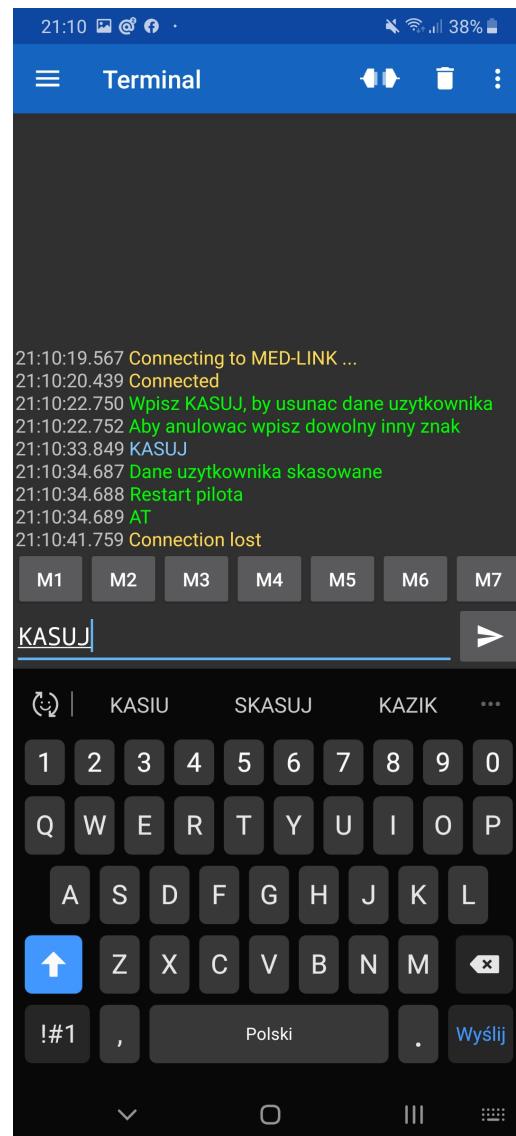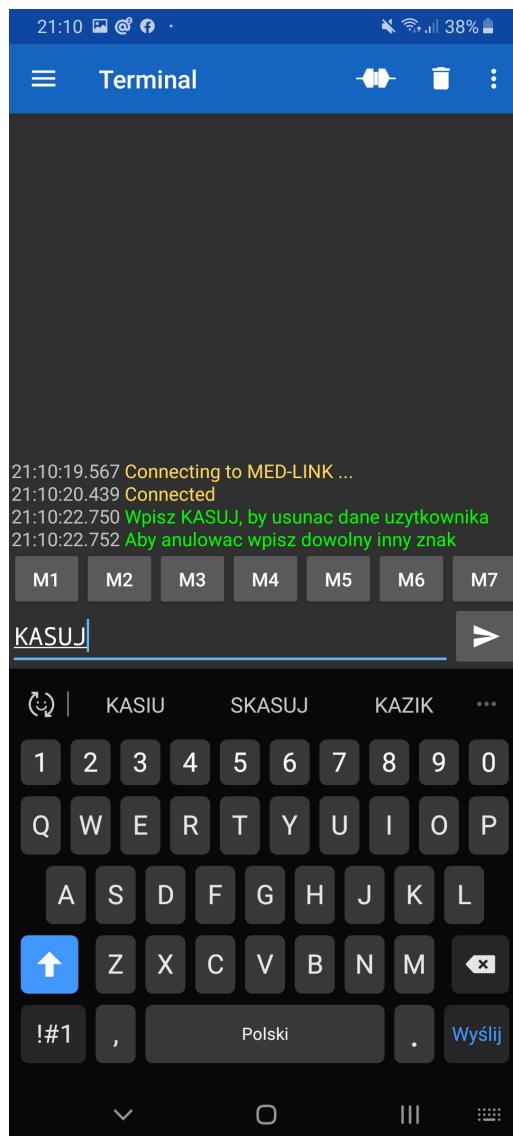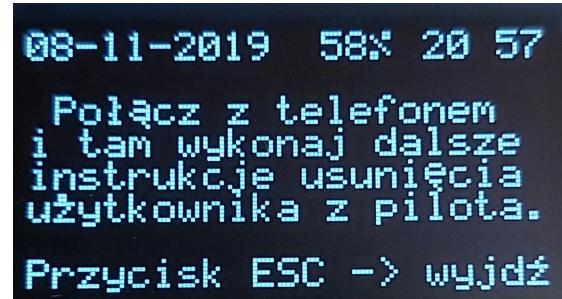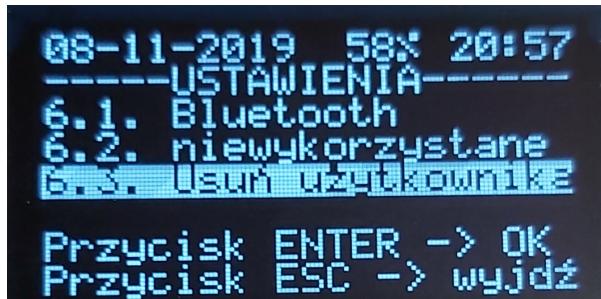

Powyższa procedura skasowania użytkownika jest możliwa tylko przy czynnej komunikacji z aktualnie używaną pompą. Natomiast awaryjne skasowanie użytkownika w przypadku braku wcześniej powiązanej pompy lub jej awarii jest możliwe po przytrzymaniu przez 10 sekund przycisku ESC na pilocie w przypadku gdy pojawi się na ekranie odpowiedni komunikat informujący o 3 krotnej próbie wybudzenia pompy i braku odpowiedzi od niej. Po każdym skasowaniu danych użytkownika pilot będzie się domagał ponownego utworzenia użytkownika:

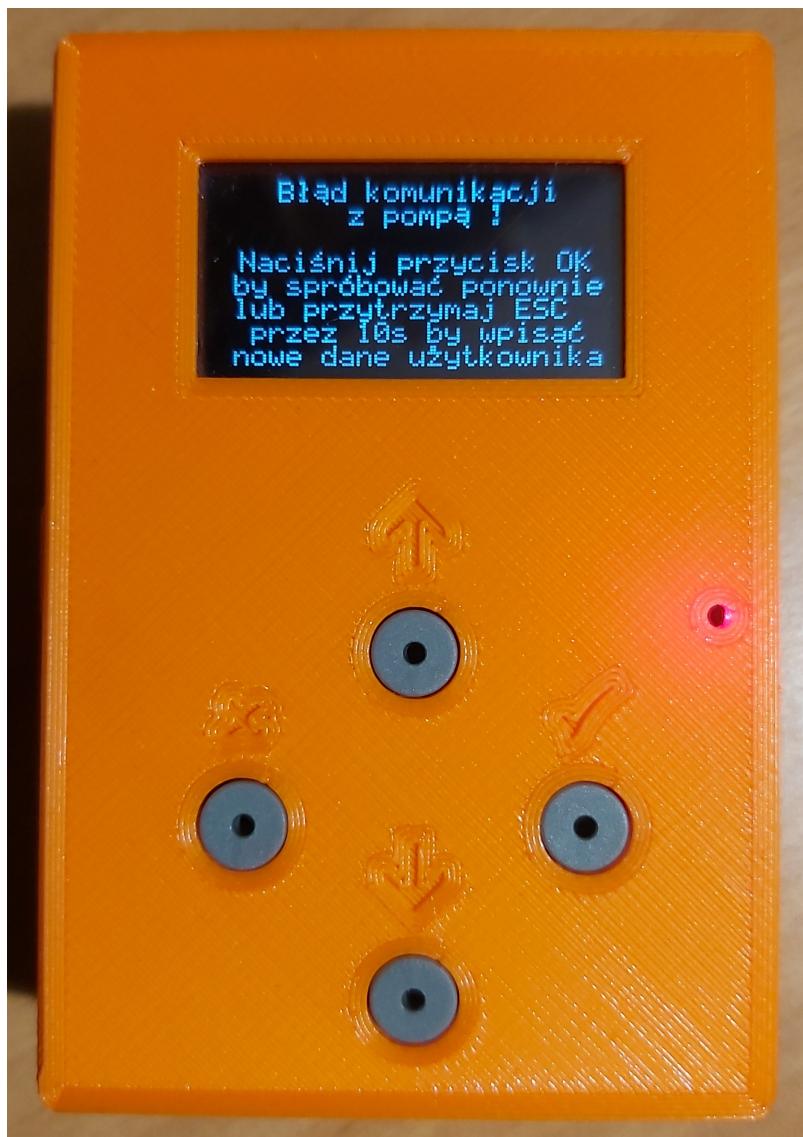

POWODZENIA !